


ClearView™

Anti-Fog Scope Warmer

LAY SCOPE(S) IN WARMER

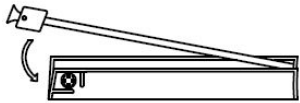

FLEX DISK 2 OR 3 TIMES



WARM FOR USE IN 2 MINUTES

Note: Best to start the scope warmer 5 minutes before the scope is needed.

ClearView™ stays warm up to one hour.


Cover with sterile towel to preserve sterility and retain warmth.

LATEX FREE
DEHP FREE
SINGLE USE
PRODUCT STERILE UNLESS
PACKAGE OPENED OR DAMAGED

Manufacturing date: shown on the seal

Expiration date: 3 years from manufacturing date

Normal storage conditions: not below -2°C

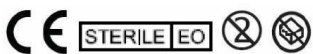


MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
Product no. 31SW01

ClearView™

Anti-Fog Scope Warmer

LEG DE SCOPE(N) IN DE WARMER

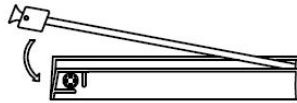

BUIG DE MUNT 2 OF 3 KEER



WARM VOOR GEBRUIK IN 2 MINUTEN

Nota: start de scopewarmer 5 minuten voordat de scope nodig is. ClearView™ blijft tot een uur warm.

Dek af met een sterile doek om steriliteit en warmte te behouden

LATEX VRIJ
DEHP VRIJ
EENMALIG GEBRUIK
PRODUCT IS STERIEL TENZIJ
VERPAKKING GEOPEND OF
BESCHADIGD IS

Productie datum: zie opdruk

Verval datum: 3 jaar na productiedatum

Normale bewaar condities: niet onder -2°C



MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
Produkt NR. 31SW01

ClearView™

Anti-Beschlag Scope Warmer

SCOPE(S) IN DEN WARMER LEGEN



SCHEIBE 2 ODER 3 MAL DREHEN



WARM FUR DEN GEBRAUCH INNERHALB VON 2 MINUTEN

Achtung: Der Scope Warmer sollte 5 Minuten vor Gebrauch des Scope eingeschaltet werden.

ClearView™ bleibt bis zu einer Stunde warm.

Mit sterilem Handtuch abdecken um die Sterilitat zu bewahren und die Warme zu erhalten.

LATEXFREI
DEHP-FREI
FUR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH
PRODUKT STERIL BIS AUF
VERPAKKUNG GEOFFNET ODER
BESCHADIGT

Herstellungsdatum: Siehe Versiegelung

Verfallsdatum: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Nicht unter -2°C lagern



MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
Produkt NR. 31SW01

ClearView™

Chauffe-endoscope anti-buee

PLACER L'ENDOSCOPE DANS LE CHAUFFEUR



TOURNER LE DISQUE 2 OU 3 FOIS



TEMPERATURE D'UTILISATION ATTEINTE EN 2 MINUTES

Note: Il est conseille de mettre le chauffe-endoscope en route 5 minutes avant d'utiliser l'endoscope.

ClearView™ reste chaud pendant plus d'une heure.


Couvrir a l'aide d'une serviette sterile afin de le maintenir sterilise et de conserver la chaleur.

SANS LATEX
SANS DEHP
USAGE UNIQUE
PRODUIT STERIL SAUF SI
EMBALLAGE OUVERT OU
ENDOMMAGE

Date de fabrication : voir scelle

Date d'expiration : 3 ans a partir de la date de fabrication

Conditions de conservation : ne pas conserver en dessous de -2°C

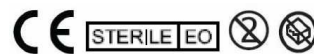


MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
Produit nr. 31SW01

ClearView™

Scalda ottiche antiappannamento

INSERIRE UNA O PIU' OTTICHE NELLO SCALDA OTTICHE

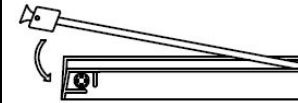

PREMERE 2 O 3 VOLTE SUL DISCO



PRONTO ALL'USO IN 2 MINUTI

Nota: lo scalda ottiche andrebbe acceso 5 minuti prima di usare l'ottica

ClearView™ si mantiene caldo per un'ora.

Coprire con panno sterile per garantire la sterilita e trattenere il calore.

SENZA LATTICE
SENZA DEHP
MONOUSO
PRODOTTO STERILE PURCHE' LA CONFEZIONE NON SIA DANNEGGIATA O APERTA

Data di fabbricazione: vedi sigillo di chiusura

Data di scadenza: 3 anni dalla data di fabbricazione

Condizioni normali di conservazione: non inferiori a -2°C



MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
Prodotto no. 31SW01

ClearView™

Calentador de endoscopio anticondensaci3n

COLOQUE EL/L OS ENDOSCOPIO(S) EN EL CALENTADOR



DOBLE EL DISCO DOS O TRES VECES



CALIENTE Y LISTO PARA SU USO EN DOS MINUTOS

Nota: encienda el calentador cinco minutos antes de que vaya a necesitar el endoscopio

ClearView™ se mantiene caliente hasta una hora.

Cubralo con una toalla esteril para conservar la esterilidad y mantener el calor.

SIN LATEX
SIN DEHP
DE UN SOLO USO
PRODUCTO ESTERIL SALVO QUE EL PAQUETE ESTE ABIERTO O DETERIORADO

Fecha de fabricaci3n: figura en el precinto

Fecha de caducidad: tres aos a partir de la fecha de fabricaci3n

Condiciones normales de almacenamiento: nunca por debajo de los -2°C



MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
No de producto 31SW01